



PERSONALISIERTE
BRILLENGLÄSER

PRÄZISION

MACHT DEN UNTERSCHIED
ZWISCHEN ANGEFERTIGT UND
MASSGEFERTIGT

SEIKO | XCEED

SEIKO

PRECISION FOR VISION

HAUTE COUTURE BEGINNT MIT PRÄZISION

VISIONÄRE RAFFINESSE

Werfen Sie einen Blick auf SEIKO I Xceed: das personalisierte, hochwertige Einstärken-glas für einzigartige Sehqualität. Speziell auf Ihre Maße zugeschnitten und passend zu Ihrem Lebensstil bietet dieses Brillen-glas herausragende Sehleistung und ein elegantes Design.

SEIKO I Xceed ist das erste Brillen-glas, das die bevorzugte Sehent-fernung berücksichtigt, sodass Sie für Ihre Sehanforderungen – nah, mittel oder weit – in allen Bereichen des Brillenglases von maximaler Klarheit profitieren.





Jetzt können Sie sich auf Ihr Leben und
Ihr Wohlergehen konzentrieren statt auf Ihre Brille.
Entscheiden Sie sich für SEIKO I Xceed, wenn Sie in
folgenden Bereichen besonders hohe Ansprüche stellen:

PERSONALISierter STIL

SEHLEISTUNG

TRAGEKOMFORT

SICHERHEIT

EXZELLENZ FÜR ALLE ANSPRÜCHE

FÜR EINE PRÄZISE OPTIK

Gefertigt mit größter Sorgfalt, Kompetenz und Präzision, speziell für Ihre Augen: SEIKO I Xceed bietet eine optimierte Sicht und überragenden Stil.

Wenn Sie es gewohnt sind, im Leben hohe Standards zu setzen, und der Meinung sind, Ihre Brille solle das widerspiegeln, dann sind diese ultradünnen, leichten Gläser genau das, was Sie brauchen.





OPTIMALER
STIL

OPTIMALE
KLARHEIT

**KOMFORT UND STIL
WAREN NOCH NIE SO EN VOGUE.**

Freuen Sie sich über die Anpassung Ihrer Gläser bis ins kleinste Detail für eine außergewöhnlich harmonische Sicht.

Profitieren Sie von Präzision auf der gesamten Glasoberfläche und gehen Sie keine Kompromisse ein.

Genießen Sie beispiellos dünne Brillengläser für ein natürliches Aussehen von Augen und Gesicht.

ULTIMATIVE INDIVIDUALITÄT FÜR EIN EINZIGARTIGES SEHERLEBNIS

DIE HÖCHSTE FORM DER INDIVIDUALISIERUNG

Mit Brillengläsern, die alle Aspekte Ihres Alltags berücksichtigen, gewöhnen sich Ihre Augen um einiges schneller an die neue Brille.

SEIKO I Xceed richtet sich bei der Herstellung genau nach Ihren täglichen Sehanforderungen – so fühlen Sie sich gut und sehen großartig aus. Ihr Lebensstil bestimmt, wer Sie sind. Durch die individuelle Fertigung der Brillengläser SEIKO I Xceed und den beispiellosen Fokus auf das, was Ihre Person ausmacht, wird genau das berücksichtigt.

LIFESTYLE TYP A



LIFESTYLE TYP B




LIFESTYLE TYP C




FÜR ALLE, DIE MIT WEITSICHT DURCHS LEBEN GEHEN

Wenn Sie häufiger in die Ferne als nah sehen, sollten Sie sich für Typ A entscheiden – eine großartige Wahl für alle, die Objekte oder Menschen aus der Ferne anschauen oder weit entfernte Texte und Bilder erkennen müssen.

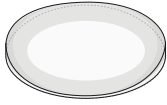

Fernsicht

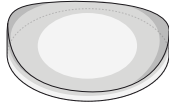

Ausgewogene Sicht




Nahsicht



FERNSICHT

FÜR ALLE, DIE PERFEKTE BALANCE SUCHEN


Für die hohen Ansprüche derer, die den Fokus sowohl auf Weit- als auch auf Nahsicht legen. Typ B ist perfekt für alle, die häufig weit entfernte Objekte und Menschen anschauen, dabei jedoch auch den Blick auf ihre digitalen Geräte oder andere Tätigkeiten nicht vernachlässigen dürfen.

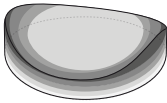

Fernsicht



Ausgewogene Sicht

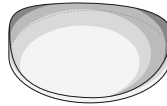


Nahsicht



AUSGEWOGENE
SICHT

FÜR ALLE, DIE GERNE GANZ GENAU HINSEHEN


Für Menschen, die sich die Dinge überwiegend aus der Nähe ansehen, ist Typ C die richtige Lösung. Er erlaubt maximale Präzision und Schärfe beim Lesen klein geschriebener Texte und beim Betrachten von Bildern aus der Nähe.

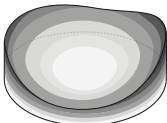

Fernsicht



Ausgewogene Sicht

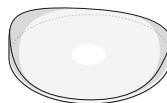

Nahsicht



NAHSICHT

MATERIALIEN UND BESCHICHTUNGEN VERBUNDEN DURCH PRÄZISION

UNZÄHLIGE KOMBINATIONEN, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

Seikos exzellenter Einsatz für ultimative Individualisierung zielt auf ein maximales Seherlebnis ab. Daher steht eine unbegrenzte Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Verbindung von Material, Veredelung und Tönung bestimmt die Wahrnehmung des Brillenträgers. Für das bestmögliche Resultat ist die Auswahl optimaler Bestandteile unerlässlich. Als Veredelung für SEIKO I Xceed wird SEIKO SuperResistantCoat-UV empfohlen. Sie schützt die Gläser vor Kratzern und Schmutz und Ihre Augen vor schädlichem UV-Licht.



TÖNUNG

Die neuen polarisierenden Brillengläser in beispielsweise Grün reduzieren Blendungen. Spiegelnde Oberflächen wie Glasfassaden, Wasser oder Schnee werden Sie nicht mehr stören. Außerdem sehen Sie mit polarisierenden die Bildschirme mobiler Endgeräte besonders gut. Funktion und Stil werden optimal kombiniert.

VEREDELUNG

Schädliche UV-Strahlen sind auch an bewölkten Tagen allgegenwärtig. Daher empfehlen wir SEIKO SuperResistantCoat-UV, präzise gefertigt, um Augen und Gläser zu schützen. Die Veredelung bewahrt vor Kratzern und Schmutz, lässt die Brille länger wie neu aussehen und erfordert weniger intensive Reinigung.

MATERIAL

Seiko 1.74 ist das dünnste und das eleganteste aller Materialien. Es bietet ultimativen Sehkomfort, reduziert optische Verzerrungen maßgeblich und garantiert elegantes Aussehen. Die logische Wahl für alle, die kompromisslose High-End-Leistung und unvergleichliche Ästhetik suchen.



WÄHLEN SIE IHRE LIEBLINGSFARBEN

Die Farbpalette von Seiko enthält mehr als 200 Farben –

Sie haben die Auswahl. Das vollständige Produktportfolio der Tönungen finden Sie in der Farbbroschüre von Seiko.

Pastellfarben und Verspiegelungen:


Ultramodisch und mit UV-Schutz.

Bis zu 85 % Verdunkelung:

Neben Vollfarben sind auch Farbverläufe möglich.

Polarisation in drei Farben:

Bei einer Verdunklung von 85 % sorgen diese Brillengläser für ein angenehmes Sehgefühl und mehr Kontrast.



DÜNN, DÜNNER, AM DÜNNSTEN

Index 1.50: die zuverlässigen Standardgläser

Index 1.60: angenehm dünn und robust

Index 1.67: besonders dünn, aber trotzdem flexibel und robust

Index 1.74: dünnste Gläser für höchste Eleganz



SCHUTZ FÜR IHRE AUGEN UND GLÄSER

SEIKO SuperResistantBlue (SRB/SRB-UV):

Reduziert das reizverursachende blaue Bildschirmlicht. Darüber hinaus reduziert die SRB-UV-Veredelung bis zu 100 % der UV-Strahlung.

SEIKO RoadClearCoat (RCC):

Sorgt vor allem nachts und bei dämmerigen Lichtverhältnissen für blendfreie Sicht.

SEIKO SuperResistantCoat (SRC/SRC-UV):

Die innovative Veredelung schützt gegen Kratzer, Stöße und Hitze, perfekt für den Alltag. Die SRC-UV-Veredelung reduziert zudem die UV-Strahlung um bis zu 100 %.

BALANCE ZONE TECHNOLOGY:

PRÄZISION UND ÄSTHETIK


IM VOLLKOMMENEN GLEICHGEWICHT

ABSOLUTE ELEGANZ DANK MODERNSTER TECHNOLOGIE

Die Balance Zone Technology von Seiko ist eine einzigartige Glas-Technologie, die eine optimale Balance zwischen Funktion und Ästhetik findet, indem sie ein elegantes Design mit idealer Sehleistung schafft.

Optische Vergrößerungen oder Verkleinerungen der Augenpartien, die durch dicke Gläser entstehen, werden reduziert. Die Gesichtszüge behalten dadurch ihr natürliches Aussehen bei.

Zugleich wird die Abbildungsschärfe im gesamten Glasbereich optimiert. So erhalten Sie die erstklassige Sehschärfe, für die Seiko bekannt ist. Es ist das vollendete Zusammenspiel maximaler Leistung und edler Eleganz.

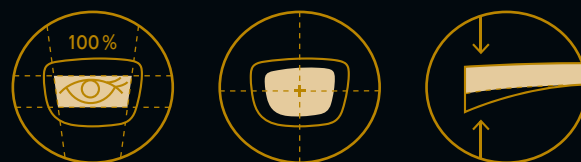

Extrem natürliches Aussehen
Maximale Präzision im Hauptsichtfeld
Extrem dünne Glasränder

SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN. ELEGANTER LOOK.

Genießen Sie scharfes Sehen und ein optimales Erscheinungsbild. Die Balance Zone Technology von Seiko sorgt für ausgezeichnete Sicht in allen Bereichen des Glases und garantiert maximale Präzision im Hauptblickfeld. Das heißt, Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Wahrnehmung extrem präzise bleibt. Zugleich ermöglicht unsere Technologie flachere und dünnere Glasränder, die für eine raffiniertere Erscheinung sorgen. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Augen und Gesichtskonturen optimal zur Geltung kommen.



BALANCE ZONE
TECHNOLOGY

Innovative, äußerst
elegante Gläser

MAXIMALE PRÄZISION
sorgt für extrem
scharfe Sicht




MAXIMALE ELEGANZ
bietet extrem
dünne Ränder

TECHNOLOGIE UND PRÄZISION IM EINKLANG


Seiko gehört seit Jahrzehnten zur internationalen Avantgarde der Augenoptik. Unser beständiges Streben nach Präzision und Vollkommenheit drückt sich nicht nur in unseren außergewöhnlichen Produkten aus, sondern auch in den zahllosen Patenten und technischen Errungenschaften.

Jede Entwicklung hat das Erfüllen von Kundenwünschen zum Ziel und macht das visuelle Erlebnis noch präziser und ästhetischer. Der unermüdliche Innovationsgeist erlaubt es Seiko, erstklassige Sehqualität zu schaffen.

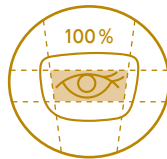


BALANCE ZONE TECHNOLOGY

Diese einzigartige Technologie schafft es, das natürliche Aussehen der Augen- und Gesichtskonturen zu erhalten. Die Abbildungsschärfe ist optimal, gleichzeitig sind die Brillengläser durch eine besondere Randgestaltung extrem dünn und leicht.

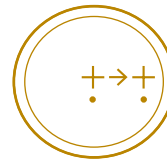

DECENTERING (ASPHERIC)

Die „Dezentrierung“ erlaubt es, die optische Achse gegenüber der geometrischen Achse zu versetzen, um den Glasdurchmesser besser zu nutzen und die Brillengläser ästhetisch vorteilhafter zu gestalten.

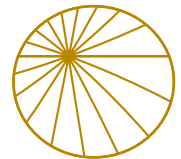


ASTIGMATISM CORRECTION

Modernstes asphärisches Design sorgt unter Berücksichtigung des Gesetzes von Listing vor allem bei Hornhautverkrümmungen für eine Optimierung in alle Richtungen. Die Achslage passt sich allen Augenbewegungen an, so dass optische Verzerrungen auch bei schrägen Zylindern beträchtlich reduziert werden.

ANHALTENDE EXZELLENZ

SEIKO | Xceed
übertrifft alle früheren
Einstärkengläser.

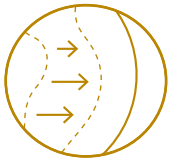


ASPHERIC ADJUSTMENT

Mithilfe der Frei-Form-Technologie werden asphärische Kurvenverläufe unabhängig von der Basiskurve gemäß Verschreibung der inneren Oberfläche der Gläser angepasst. Aufgrund der vorhandenen vorderen Kurve garantiert diese individuelle Anpassung bei jeder Korrektur eine optimale Bildgüte.



PRISM ABERRATION CONTROL

Neben den bei klassischen Korrekturwerten vorhandenen prismatischen Abbildungsfehlern werden die speziellen Abbildungsfehler, die auf Korrekturprismen zurückzuführen sind, individuell korrigiert, so dass die optische Qualität trotz der zusätzlich erforderlichen prismatischen Korrekturwerte fast gleich bleibt.

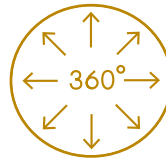

360° DESIGN INNER ASPHERIC


Das perfekte optische Design wird mit SEIKO Digital Surfacing auf der Innenseite der Gläser ausgeführt. Das speziell für dieses Brillenglas entwickelte asphärische Design optimiert die Abbildungsqualität. Es reduziert außerdem den Verkleinerungs-/Vergrößerungseffekt und die Verzerrung aller Sichtweiten und der Basiskurve.



DESIGN FOR FRAME & FITTING

Diese Optimierung findet bei Brillengläsern Anwendung, die eine hohe Vorderflächenkrümmung aufweisen, damit je nach individuellen Vorgaben, Zentrierdaten und Basiskurve eine weitgehend verzerrungsfreie Sicht erreicht wird.

ZENTRIERKARTE SEIKO | XCEED

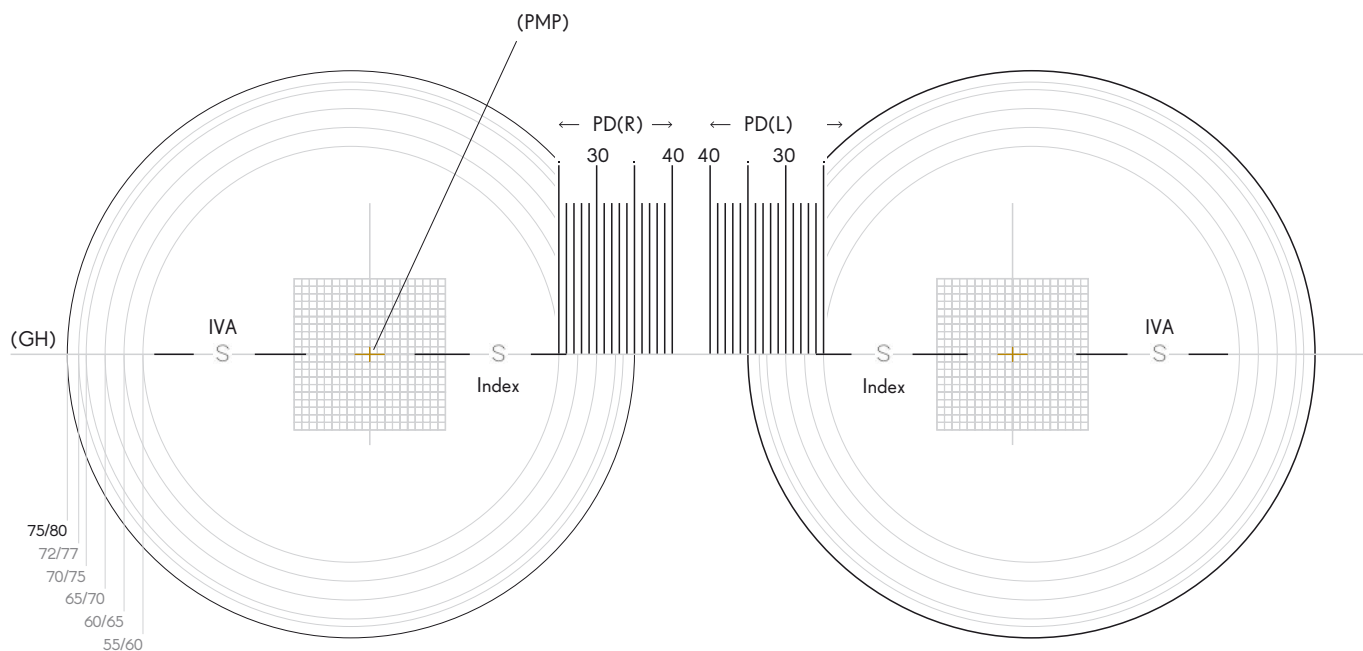

(GH) Glas-Horizontale / (PMP) Prismenmesspunkt

IXA Produkt/Design (temporal)

IXA = Priorität Ferne

IXB = Ausgewogenes Design

IXC = Priorität Nähe

Index (nasal)

⌘ ≅ 1.74

⌘ ≅ 1.67

⌘ ≅ 1.60

⌘ ≅ 1.50

EINE NEUE DIMENSION DER EXKLUSIVITÄT

PRÄZISE PERSONALISIERUNG FÜR JEDEN LEBENSSTIL

SEIKO I Xceed integriert eine Anpassung auf Kundenwünsche, die neue Standards setzt. Unter besonderer Berücksichtigung des jeweiligen Lebensstils entstehen Brillengläser, die so individuell sind wie ihre Besitzer.

Für SEIKO I Xceed brauchen wir folgende Angaben:

- Lifestyle Typ
- Durchmesser
- Rezeptwerte
- Pupillendistanz R/L
- Einschleifhöhe nach Kastenmaß
- Hornhautscheitelabstand (HSA)
- Vorneigung
- Fassungsscheibenwinkel (FSW)
- Idealerweise die Formdaten
- Scheibenlänge/-höhe und Brückenweite (AzG)
- Brechungsindex
- Tönung
- Veredelung
- Andere Optionen, z. B. STYLISH
- Anpassung nach Nullblickrichtung

SEIKO VISION XPERIENCE – DIE ANWENDUNG

ERLEBEN SIE MASSANFERTIGUNG

EINFACHES VERFAHREN. PRÄZISE ERGEBNISSE.

Die SEIKO Vision Xperience-App ist ein präzises digitales Tool, das es spielend leicht macht, alle Angaben und Parameter zu erfassen, die zur Bestellung von Seiko Gläsern benötigt werden.

Die Zentrierung ist einfach und akkurat. So können Sie sich sicher sein, dass Sie nicht einen einzigen Glas- und Fassungsparameter vergessen haben. Zudem können Ihre Kunden mit der AR-Simulation die ausgezeichnete Leistung ihrer neuen Gläser erleben und zugleich feststellen, wie ihnen andere Fassungen stehen würden.

SCHNELL UND PRÄZISE

Die SEIKO Vision Xperience-App sammelt auf ganz einfache Weise individuelle Angaben und Parameter.

SO FUNKTIONIERT'S

SEIKO Vision Xperience erfasst Maße schnell und unkompliziert in fünf einfachen Schritten:

1. Kontrollieren Sie den Sitz, sobald Ihr Kunde die von ihm oder ihr bevorzugte Fassung aufgesetzt hat, und nehmen Sie eventuelle Anpassungen vor.
2. Wählen Sie in der App die Option „Messung“, um das tragbare Zentriergerät zu starten.
3. Ein speziell dafür entwickelter Messaufsatz wird auf die ausgewählte Fassung montiert.
4. Überprüfen Sie die richtige Kopf- und Körperhaltung des Kunden und machen Sie dann mit dem iPad ein Foto vom Kunden.
5. Die App ermittelt die Zentrierdaten automatisch und sendet sie an das Bestellsystem.

Tipp: Bei allen Seiko-Produkten erhalten Sie auf Wunsch ein dezentes Seiko Branding kostenlos dazu. Bitte einfach bei der Bestellung angeben!



Geen simkaart

15:22

100%

SEIKO

PRECISION FOR VISION

Near PD

Far PD

Sessions

Corridor Length



Personalized Measurements

Far Vision

	PD	Fitting Height
R	27.4	25.5
L	27.6	
Tc		

Frame

A	45.6	Type	Metal
B	33.9	Bevel	0.8
DBL	17.0	R	L
ED			

Position of Wear

Panto Tilt	7.4°
Vertex	9.5
Wrap	5.6°
Hard frame	☐

Near Vision

	PD	Inset	Bilateral Seg Height
R	26.2	1.1	20.5
L	25.6	2.1	Reading distance, cm
Up fit	11.0	39.3	

VERFÜGBARKEIT DER PRODUKTE

LIEFER- PROGRAMM

OPTIMALE GLÄSER
FÜR JEDES AUGE

HABEN SIE FRAGEN ZUM LIEFERPROGRAMM?

Wir senden Ihnen gern Einzelheiten
zum kompletten Lieferprogramm
SEIKO I Xceed.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.seikovision.com

+14 +13

1.74

1.67 & SEIKO SENSITY

1.67 SEIKO PolarThin

1.60 & SEIKO SENSITY

1.60 SEIKO PolarThin

1.50 & SEIKO SENSITY

1.50 Polarized

SEIKO

PRECISION FOR VISION

HERAUSGEBER

Seiko Optical Europe GmbH

Dohrweg 42 | 41066 Mönchengladbach

Tel: +49 (0) 21 61 – 65 22 – 555

info.germany@seikovision.com | www.seikovision.com

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Nachdruck und Verwendung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.